



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

IRRIGADOR ORAL SEM FIO JET CLEAN

RM-IO0006A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS.....	3
2. LIMPEZA.....	5
3. MODO DE USAR.....	6
4. DETALHES DO PRODUTO	10
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	11
6. TERMOS DE GARANTIA.....	12

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Obrigado por escolher o IRRIGADOR ORAL SEM FIO JET CLEAN. Este irrigador é portátil e funcional. Remove a placa bacteriana e os alimentos entre os dentes e abaixo da linha da gengiva. Apresenta três modos de pressão de água e modo pulso. Conta com um reservatório para até 300 ml de água e vem com 5 bicos para uso.

- Durável: longo tempo de uso contínuo
- Portátil: leve para onde quiser!
- Á prova d'água
- 5 intensidades de pressão
- Proteção de água IPX7
- Pressão de água de 40 a 110psi
- Carregamento de bateria de 3 a 5 horas

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

Antes de usar o produto, as seguintes precauções básicas devem sempre ser seguidas:

- Encha o reservatório apenas com água.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Este produto não pode ser usado por crianças e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento.

ATENÇÃO! RISCO DE EXPLOSÃO DA BATERIA!

- Nunca exponha a altas temperaturas;
- Verifique se a tensão doméstica corresponde à especificação nominal do aparelho;
- Não manuseie o plugue com as mãos molhadas;
- Cuidado para que o adaptador de energia não caia na água;

- Mantenha o produto fora do alcance de crianças. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não toquem no aparelho;
- Não modifique o produto sob nenhuma circunstância;
- Não use este dispositivo se alguma peça estiver danificada;
- Somente técnicos qualificados devem executar reparos;
- Não use se você tiver uma ferida aberta na língua ou na boca;
- Não use com nenhum outro propósito além da limpeza oral;
- Não use este produto ao ar livre ou opere onde produtos em aerosol (spray) estejam sendo usados ou onde esteja sendo administrado oxigênio;
- Não direcione a água para o nariz e o ouvido. Este produto é capaz de produzir pressões que podem causar sérios danos nessas áreas;
- Não encha o reservatório com água com temperatura acima de 40°C;
- Não use iodo, água sanitária ou óleos essenciais concentrados insolúveis em água neste produto. O uso destes pode reduzir o desempenho do produto e reduzir a vida útil do produto;
- Remova todas as jóias orais antes de usar este produto;
- Não use o produto continuamente, pois isso pode prejudicar o desempenho do produto;
- Esvazie a água restante do reservatório entre os usos. Drene o dispositivo operando por 3 segundos com um reservatório vazio;
- Desconecte o cabo de carregamento ao limpar o dispositivo;
- Nunca ligue o produto antes de colocar o bico na sua boca;
- Nunca pressione o bico com muita força contra seus dentes ou gengivas;
- Nunca use este produto para limpar outras partes do corpo tais como orelhas ou olhos;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o produto sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados, para evitar assim situações de risco;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado.

MANUTENÇÃO

Certifique-se de jogar fora a água de dentro do tanque e deixe o aparelho funcionar por 2 a 3 segundos para drenar a água após o uso. Caso contrário, bactérias podem se acumular na água restante. Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido, quando necessário, realize a limpeza com um pano macio e um limpador não abrasivo suave. O reservatório pode ser lavado com água e sabão. Lave a sujeira de dentro com uma escova ou similar e limpe com um pano. Seque o reservatório quando não for usar por um longo período.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:
 - Gengivite
 - Implantes Dentários
 - Herpes
 - Aftas
 - Mucocele
 - Inflamação bucal
 - Desconforto
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

2. LIMPEZA

Bocal

Enxágue com água e seque com um pano macio.

Corpo do dispositivo principal

Limpe a superfície com um pano de limpeza e seque.

Não use diluidor, gasolina e álcool.

Não limpe com água com temperatura acima de 40 ° C.

Reservatório e mangueira de sucção

Desconecte o reservatório deslizando-o para baixo e abra a tampa. Limpe a sujeira da tampa e remova a sujeira no reservatório com água morna e deixe secar antes de substituir. Limpe a mangueira de sucção com água e seque. Não puxe e torça a mangueira.

Antes de usar

Se o dispositivo for novo ou não for utilizado por um longo período de tempo, poderá não ejetar água devido a uma válvula presa. Nesse caso, siga as instruções abaixo:


- 1- Remova o bico, se estiver instalado.
- 2- Lave o suporte do bico com água por 5 a 10 segundos.
- 3- Reinsira o bico e continue a operação.



3. MODO DE USAR

Instruções de operação

Insira o bico no orifício na parte superior do irrigador oral até ouvir um clique. Para remover, pressione o botão de liberação do bico e puxe.

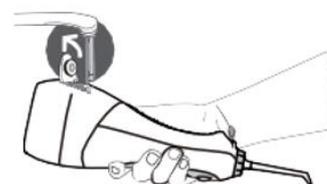

Preenchendo o Reservatório

Levante a tampa do reservatório e preencha com água.



Inserindo e Removendo as Pontas

Insira a ponta no centro do botão na parte superior do dispositivo. Pressione firmemente até que a ponta se encaixe no lugar. Para remover a ponta do irrigador, pressione o botão de ejeção da ponta e puxe a ponta do controle.

CUIDADO: Não pressione o botão de ejeção da ponta enquanto o dispositivo estiver funcionando.

Modo de pressão

O irrigador oral possui 5 intensidades de Pressão, sendo essas:

- Super Forte
- Forte
- Médio
- Baixo
- Suave

Recomenda-se iniciar com o modo de baixa pressão e aumentar gradativamente.

Ajustando a configuração de pressão

Você pode ajustar a configuração de pressão de água pressionando o botão de modo no dispositivo. Comece com a configuração mais baixa e aumente conforme sua preferência.

Quando Finalizado

Desligue o dispositivo. Esvazie todo o líquido restante no reservatório.

Diretrizes para aplicação oral

É possível que algum sangramento menor da gengiva ocorra com gengivas saudáveis durante as primeiras 1-2 semanas de aplicação devido a áreas periodontais sensíveis. Periodontia ou outro distúrbio pode ser indicado se o sangramento continuar após 2 semanas de uso. Neste caso, pare de usar o dispositivo e consulte um dentista. Se o seu médico o aconselhou a receber pré-medicação com antibióticos antes dos procedimentos odontológicos, consulte seu dentista antes de usar este produto.

MODO DE USO:

Ponta a Jato




Direcione o jato para os dentes e gengivas, deslize o botão da dispositivo para cima para iniciar o fluxo de água. Mantenha a boca ligeiramente aberta para permitir que a água escorra para a pia. Direcione o jato de água em direção à linha da gengiva a 90 graus, de modo que o contato seja feito onde o dente e a gengiva se encontram. Conduza o fluxo de água de dente em dente, lembrando-se de fazer uma breve pausa entre cada dente.

Ponta Periodontal



Coloque a ponta periodontal em contato entre os dentes e a linha gengival. Encoste a ponta macia em um dente em um ângulo de 45 graus e coloque delicadamente a ponta sob a linha da gengiva. Inicie o irrigador ajustando-o na pressão mais baixa e limpe seguindo suavemente a linha da gengiva, inserindo a ponta periodontal entre os dentes. Continue traçando ao longo da linha gengival para massagear as gengivas e aplicar a solução com segurança nas bolsas gengivais abaixo da linha gengival.

Ponta Ortodôntica

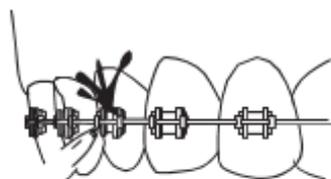


Use a ponta ortodôntica para escovar e enxaguar simultaneamente áreas difíceis de alcançar em torno de aparelhos, coroas, pontes e implantes. Comece no último molar (dente posterior). Coloque a ponta em um ângulo de 90 graus em relação ao dente na linha da gengiva. Deslize suavemente a ponta ao longo da linha da gengiva, parando brevemente para escovar levemente a área entre o dente e todo o suporte ortodôntico, antes de prosseguir para o próximo dente e fora dos dentes superiores e inferiores. Continue o processo até limpar o interior.



Ponta Limpadora de Língua

Incline sua cabeça sobre a pia. Deslize o botão de pressão para a configuração mais baixa. Ligue o irrigador e coloque o limpador de língua na parte de trás de sua língua e mova-o para frente para limpar sua língua. Repita para cobrir toda a língua. Ajuste a pressão para a configuração mais baixa e ajuste para uma configuração de hinger para mais pressão de água conforme for confortável.

Carregamento no Primeiro Uso

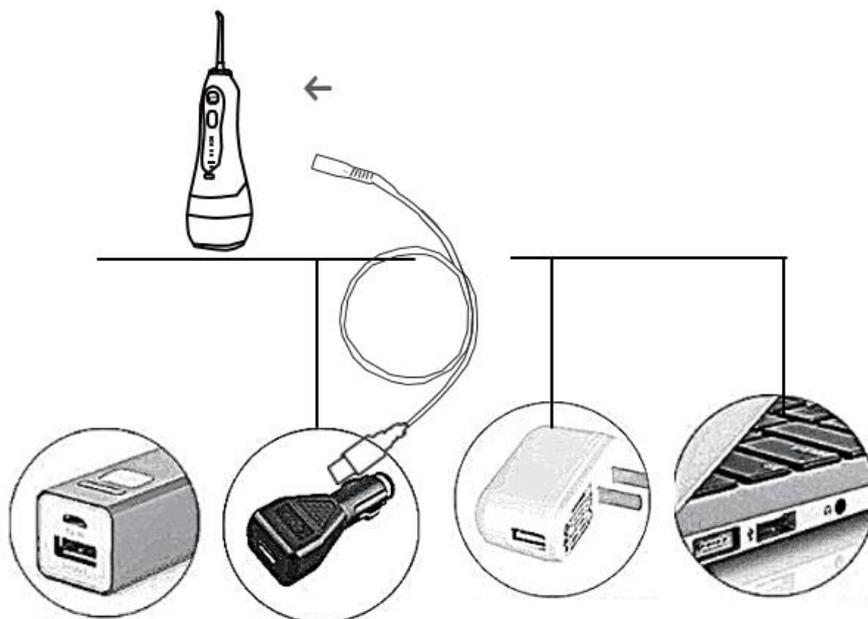

Este produto não vem com carregador AC / DC. O dispositivo é carregado por meio de dispositivos com recursos de alimentação USB de 5 V, como telefone celular, laptop, carregador de parede com alimentação USB, etc. O indicador de carga do aparelho piscará durante o carregamento e permanecerá ligado continuamente quando estiver totalmente carregado. Uma recarga completa leva por volta de 3 a 5 horas.

Solução de Problemas


Problema	Causa	Ação Corretiva
Vazamento do Reservatório	O anel de vedação está incorreto	Remova o anel e reinstale novamente
Baixa Pressão de água	Bateria baixa	Recarregue o dispositivo
	Bocal bloqueado	Substitua por um novo bocal
Duração de apenas alguns minutos com a carga completa	Sem bateria	Carregue o Irrigador
	Cabo de Carga	Tente com um novo cabo de carga
	Adaptador quebrado	Experimente com um novo adaptador
Água não sai mesmo com o motor fazendo barulho	Bocal bloqueado	Verifique a saída da água da ponteira
	Válvula de Sucção deslocada	Mantenha o dispositivo ligado, encha com água até o orifício onde a cabeça do bico encaixa.
Motor não faz barulho	Bateria baixa	Ative a bateria recarregando-a por 16 horas
Produto é aberto enquanto o aparelho funciona	A proteção contra superaquecimento é ativada (uso contínuo de cinco tanques de água com pressão mais alta)	Reinicie o dispositivo em 2 horas



Disposição


A bateria do aparelho contém lítio. No final da vida útil da bateria, recicle a unidade em seu centro de reciclagem. A bateria não é substituível.

4.DETALHES O PRODUTO

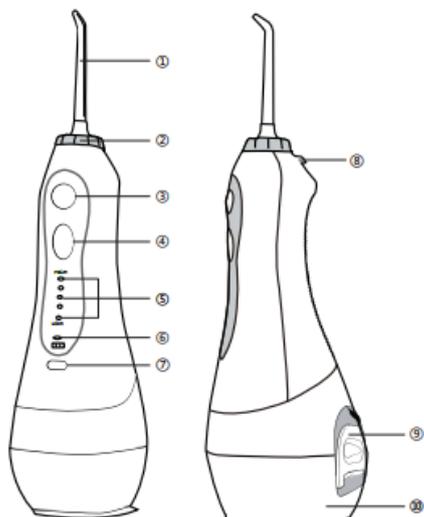

1. Bocal
2. Botão Giratório do Bocal
3. Botão Liga/Desliga
4. Botão de Seleção de Modo
5. Luzes Indicadoras de Modo
6. Luz Indicadora de Carga
7. Entrada para Carregador
8. Botão de Ejeção da Ponta
9. Tapa do Reservatório de Água
10. Reservatório de Água


Acessórios

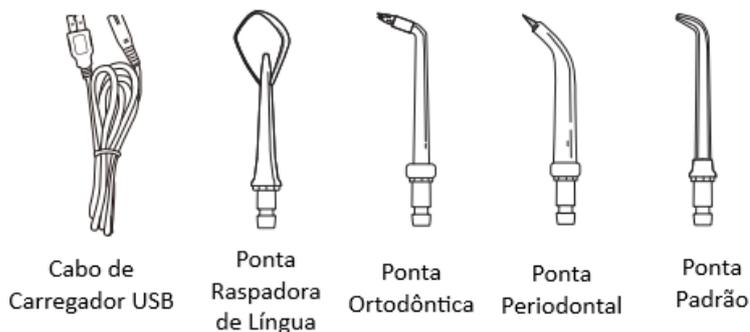

Pode ocorrer abaixo da situação quando usar esta máquina pela primeira vez ou deixá-la sem uso por um longo tempo: A cabeça do bico não pulveriza água imediatamente após ligar a máquina.

Nesse caso, siga as instruções abaixo para que funcione:

Adicione a quantidade adequada de água no local onde as pontas são inseridas. Insira a ponta e pressione o botão liga / desliga para ligar o dispositivo.

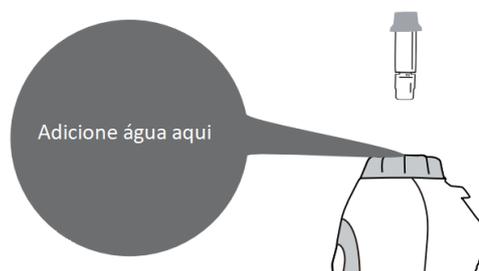

5 . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 22,2 x 7,0 x 8,0 cm

Alimentação: USB 5V

Peso: 0,31 kg

Garantia: 1 ano

Capacidade do Reservatório: 300 ml

Pressão da água: 40-110 psi

- Nível 1: 40 psi
- Nível 2: 50 psi
- Nível 3: 70 psi
- Nível 4: 90 psi
- Nível 5: 110 psi

Classificação à prova d'água: IPX7

Características Técnicas de Bateria:

Tempo de carga, de acordo com o nível selecionado:

- Nível 1: 70 minutos
- Nível 2: 56 minutos
- Nível 3: 38 minutos
- Nível 4: 33 minutos
- Nível 5: 30 minutos

Vida útil da bateria: pode ser usada cerca de 500 vezes (carga e descarga / tempo)

Tempo de carregamento: Levará de 3 a 5 horas

Conteúdo do pacote

1 x Irrigador Oral Portátil

5 x Pontas (Sendo 4 delas com funções diferentes de limpeza + 1 ponta extra)

1 x Base de carregamento sem fio

1 x Bolsa para armazenamento do produto e seus acessórios

1 x Anel de vedação do reservatório

1x Tampa preta para a entrada de carregador

1 x Manual do Usuário

6. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **2 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para este produto.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688